




05-820 Piastów
Słońskiego iela 13
Tālr./fakss: (0-22) 723-69-54
Tālr.(0-22) 723-70-72
E-pasts: biomak@biomak.pl
www.biomak.eu

SKAISTUMKOPŠANA PRO BP200 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



Aparāts mikrostrāvas un interferences strāvas terapijai un mezoterapijas procedūru veikšanai bez adatas, ievietojot preparātus, izmantojot elektroporācijas, sonoforēzes un jontoforēzes funkcijas.

Aparāta priekšējā paneļa skats

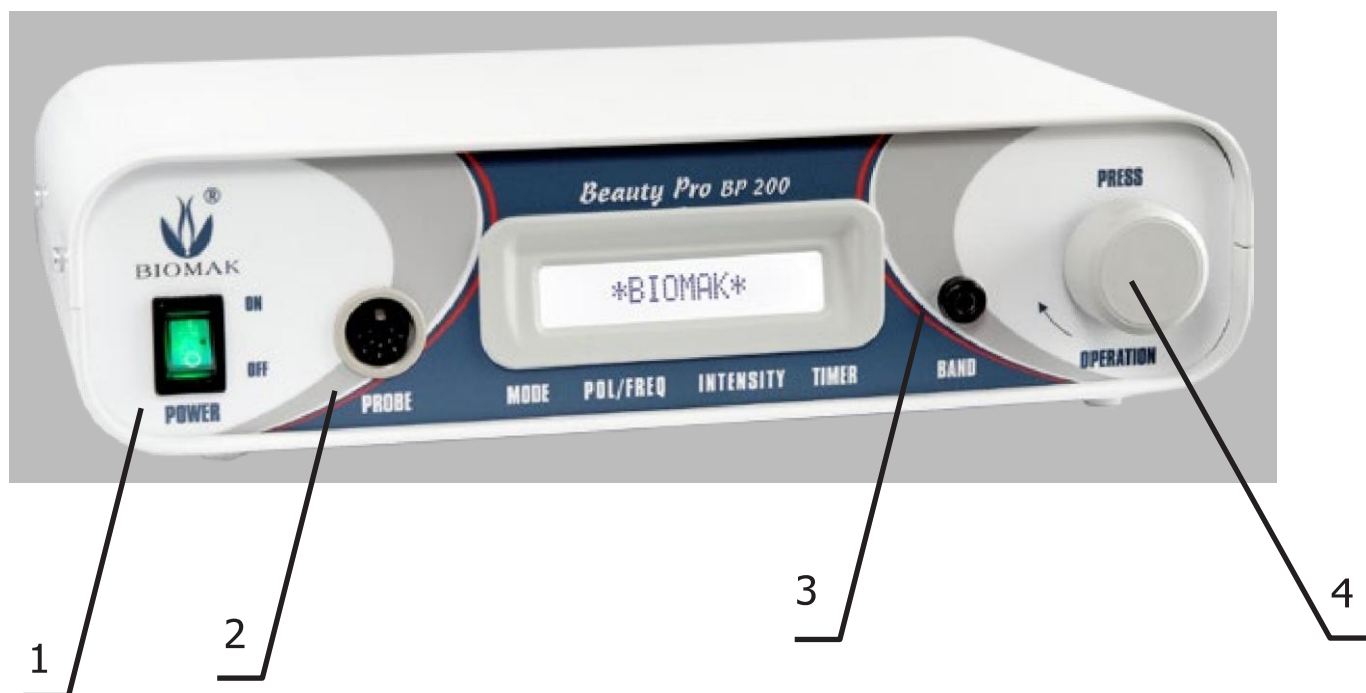

1. POWER - strāvas slēdzis
 2. ZONDE - galvas ligzda
 3. BAND - izvēles joslas ligzda
 4. PRESE/DARBĪBA, turpmāk tekstā – O/P
- Poga un poga - mainiet iestatījumus, palieliniet, samaziniet. Ilgi nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

SPECIFIKĀCIJAS:

- Barošanas avots 230 V; 50 Hz
- Jaudas patēriņš: 10 W
- Izmēri 220 x 150 x 65 mm
- Neto svars 1,2 kg

Galvaniskās strāvas regulēšanas diapazons 0 - 6mA
elektroporācijas strāvas regulēšanas diapazons 0 - 4mA / 200Hz
stimulācijas sprieguma regulēšanas diapazons 5-24V
frekvenču diapazons no 2600Hz, 1-100Hz mikrostrāvas
strāvas regulēšanas diapazons 0 – 1.5mA

Aparāts APRĪKOJUMS:

MIKROSTRĀVAS UN TRAUCĒJUMU STIMULATORA GALVA

- Apaļa galva ar 2,8 cm diametra gaismas diodēm

Gaismas diodes iedegas tikai elektrokardiotimulatora programmā.

Ar mikrostrāvām tie var nedaudz spīdēt maksimāli mikrostrāvu jauda.

Galva



AKTĪVIE ELEKTRODI ELEKTROPORĀCIJAI, JONTOFORĒZEI, GALVANIZĀCIJAS JONTOFORĒZEI

- Konuss
- Rullis
- Liels šķītis
- maza plāksne
- Lode
- BioDirecte



KABEĻI UN JOSLA SONOFORĒZEI, JONOFORĒZEI



KABELIS - PAGARINĀTĀJS



MIKROSTRĀVAS

Beauty Pro BP200 kombains - pateicoties elektrodam, kas izstaro mikrostrāvas, ļauj veikt sejas, kakla un dekoltē pacelšanu. Ādas vispārējās estētikas uzlabošanai tiek izmantots plašs mikrostrāvu klāsts, m.in: rētas, krāsas maiņa vai tumšo loku un maiņu samazināšana zem acīm.

Mikrostrāvas ir elektrostimulācijas veids, kas stimulē kolagēna šķiedru, elastīna atjaunošanos, izlīdzina ādu, palielina muskuļu šķiedru kontraktilitāti un uzlabo toksīnu izdalīšanos kopā ar lieko ūdeni. Ādas reģenerācija ar mikrostrāvas procedūrām notiek vairāk nekā 3 reizes ātrāk nekā izmantojot citas metodes, un iedarbība ir ilgstoša.

Funkcijas un terapija:

1. Sejas terapija:

Lietošanas efekts ir samazinātas rētas, ādas nevienmērība, uzlabots ādas tonis, atjaunota audu elastība, turklāt tas cīnās ar melnajiem punktiem, pinnēm, paātrina brūču dzīšanu, uzlabo mikrocirkulāciju.

2. Acu zonas terapija:

Tas noņem zilumus, maisījumus zem acīm, vārnu kājas un nokareņus plakstiņus.

3. Ķermeņa terapija:

Tas uzlabo toksīnu drenāžu un izdalīšanos no organisma, novērš pietūkumu un strijas.

Mikrostrāvas terapijā tiek izmantota impulsa līdzstrāva ar zemu intensitāti. Mikrostrāvām ir ļoti augsta spēja iekļūt šūnās.

Lietošanas indikācijas:

- nokareņas sejas kontūras,
- grumbas,
- maisījumi un tumši loki zem acīm,
- nevienmērīgs ādas tonis,
- āda kļūva pelēka,
- strijas un celulīts,
- ādas elastības un tvirtuma trūkums,
- ūdens aizture organismā.

Mikrostrāvu izmantošanas sekas:

- grumbu samazināšana,
- pareiza ādas mitrināšana,
- ādas toņa vienmērīgums,
- poru sašaurināšanās,
- reģenerācija,
- maisiņu un tumšo loku likvidēšana zem acīm,
- mikrocirkulācijas uzlabošana,
- sejas liftings,
- novājēšanu.

Kontrindikācijas:

- grūtniecība
- metāla priekšmeti ķermenī,
- epilepsija,
- vēzis,
- pēcoperācijas periods,
- drudža stāvokļi,
- ādas iekaisums.

APARĀTA SAGATAVOŠANA DARBAM



Mikrostrāvas galva



2. Ievietojiet galvas kontaktdakšu PROBE kontaktligzdā.

3. Pārslēdziet ierīci pozīcijā ON ar pogu POWER.




Sveiciena ekrāns, kad aparāts ir ieslēgta.



Tad būs iespēja izvēlēties ārstēšanas veidus:

savienojot galvu ar mikrostrāvām un elektrokardiostimulatoru

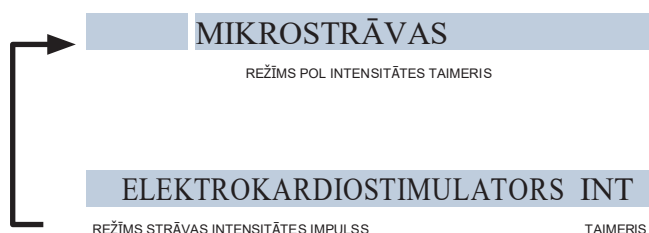

Apraksts 8. lpp.


Apraksts 15. lpp.



Pagrieziet O/R pogu, lai atlasītu pozīciju.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

savienojot spaiļes elektroporācijai, jontoforēzei vai galvanizācijai.

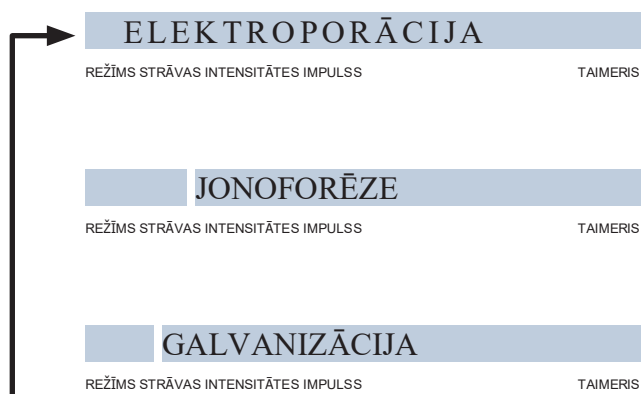

Apraksts 23. lpp.

Apraksts 30. lpp.

Apraksts 32. lpp.



Atpakaļ uz programmas izvēli, ilgi nospiediet O/R pogu.

Izvēlieties programmu MICROCURRENTS, kā parādīts 6. lpp.



Rotējot ar O/R pogu, lai atlasītu pozīciju.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Izvēlieties programmu "S" - impulsa platuma modulācija.

Platums automātiski mainās atlasītā laika cikla laikā. Tas samazinās līdz 60% no platuma un atgriežas līdz sākotnējai vērtībai.

Apstipriniet ar akceptēšanas pogu.



Pagriežot O/R pogu, atlasiet pozīciju. Jūs

piekrītat, nospiežot O/R pogu.

FREQ pozīcija mirgo. Iestatiet impulsa strāvu no 2 līdz 150 Hz. Apstipriniet ar akceptēšanas pogu.



Pagriežot O/R pogu, atlasiet pozīciju.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Mirgo pozīcija "ms". Iestatiet impulsa platumu no 5 līdz 100 ms. Apstipriniet ar akceptēšanas pogu. (Jo augstāka frekvences vērtība, jo mazāks impulsa platuma regulēšanas diapazons). piem.:


2Hz mums ir maksimāli 100 ms, pie 20 Hz mums ir ne vairāk kā 40 ms utt.



Pagriežot O/R pogu, atlasiet pozīciju.

Jūs piekrītat, nospiežot O/P pogu.

Mirgo TIMER pozīcija. Iestatiet pašreizējo cikla laiku no 5 sek. līdz 30 sekundēm. Apstipriniet ar akceptēšanas pogu.

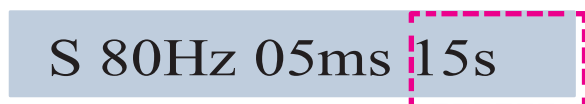

REŽĪMS BIEŽUMS ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS



Pagriezot O/R pogu, atlasiet pozīciju.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Tad mēs izvēlamies ārstēšanas ilgumu no 1 minūtes. līdz 30 min.



REŽĪMS BIEŽUMS ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS




Pagrieziet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Pēc pieņemšanas mēs sākam ārstēšanu.

Paņemiet galvu rokā un viegli pieskarieties ķermenim, lai sāktu strādāt.

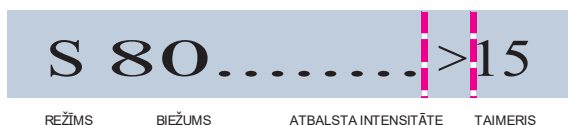

REŽĪMS BIEŽUMS ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS

Mirgojošā trīsstūra zīmogs norāda sāktu procedūru un pagājušo laiku. Programmu var apturēt, nospiežot O/P pogu.

Darba laikā mēs regulējam mikrostrāvu jaudu.



mazs Jauda
Vidējais Jauda
liela jauda




REŽĪMS BIEŽUMS ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS

Procedūras beigas signalizē ar skaņas signālu (ar nosacījumu, ka skaņas signāls ir ieslēgts).

Mēs varam atteikties no ārstēšanas pēc ilgas O/P pogas nospiešanas.




Izvēlieties programmu MICROCURRENTS, kā parādīts 6. lpp.

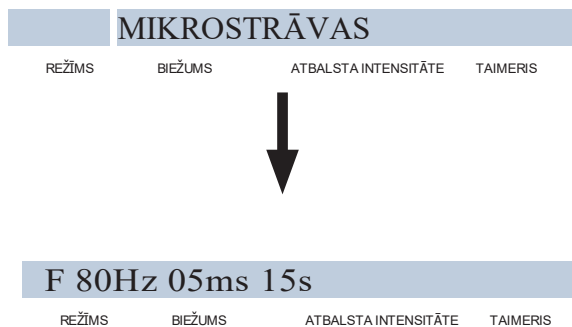

Izvēlieties programmu "F" - impulsa frekvences modulācija.

Impulsa frekvence mainās automātiski, noteiktā laika ciklā. Tas samazinās līdz 60% no iestatītās vērtības un pēc tam palielinās līdz sākotnējai vērtībai.


Apstipriniet ar akceptēšanas pogu.

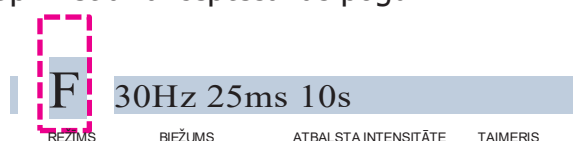

Pagriežot O/R pogu, atlasiet pozīciju.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

FREQ pozīcija mirgo. Iestatiet impulsa strāvas frekvenci no 2 līdz 150 Hz. Apstipriniet ar akceptēšanas pogu.

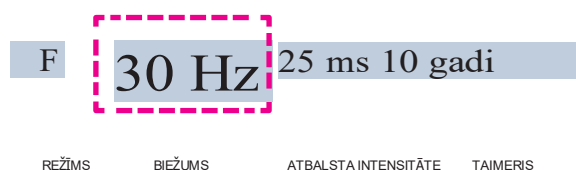

Pagriežiet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/P pogu.

Mirgo pozīcija "ms". Iestatiet impulsa platumu no 5 līdz 100 ms. Apstipriniet ar akceptēšanas pogu. (Jo augstāka frekvences vērtība, jo mazāks impulsa platumu regulēšanas diapazons). piem.:


2Hz mums ir maksimāli 100 ms, pie 20 Hz mums ir ne vairāk kā 40 ms utt.



Pagriežiet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Mirgo TIMER pozīcija. Iestatiet pašreizējo cikla laiku no 5 sek. līdz 30 sekundēm. Apstipriniet ar akceptēšanas pogu.

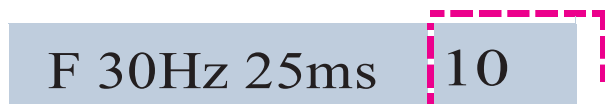

REŽĪMS BIEŽUMS ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS



Pagriežot O/R pogu, atlasiet pozīciju.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Tad mēs izvēlamies ārstēšanas ilgumu no 1 minūtes. līdz 30 min.



REŽĪMS BIEŽUMS ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS




Pagriežiet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Pēc pieņemšanas mēs sākam ārstēšanu.

Paņemiet galvu rokā un viegli pieskarieties ķermenim, lai sāktu strādāt.

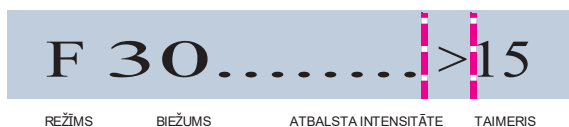


REŽĪMS BIEŽUMS ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS

Mirgojošā trīsstūra zīmogs norāda sāktu procedūru un pagājušo laiku. Programmu var apturēt, nospiežot O/P pogu.

Darba laikā mēs regulējam mikrostrāvu jaudu.



mazs Jauda
Vidējais Jauda
liela jauda

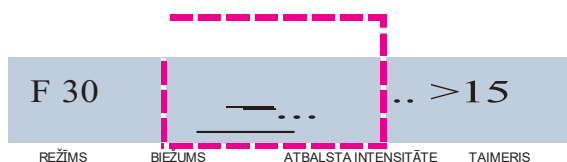

REŽĪMS BIEŽUMS ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS

Procedūras beigas signalizē ar skaņas signālu (ar nosacījumu, ka skaņas signāls ir ieslēgts).

Mēs varam atteikties no ārstēšanas pēc ilgas O/P pogas nospiešanas.



Izvēlieties programmu MICROCURRENTS, kā parādīts 6. lpp.



Izvēlieties programmu "C" - nepārtraukts impulsa platums.

Nepārtraukta stimulācija ar iepriekš iestatītu frekvenci, impulsa platumu un ārstēšanas laiku.


Apstipriniet ar akceptēšanas pogu.



Pagriežot O/R pogu, atlasiet pozīciju.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

FREQ pozīcija mirgo. Iestatiet impulsa strāvas frekvenci no 2 līdz 150 Hz. Apstipriniet ar akceptēšanas pogu.

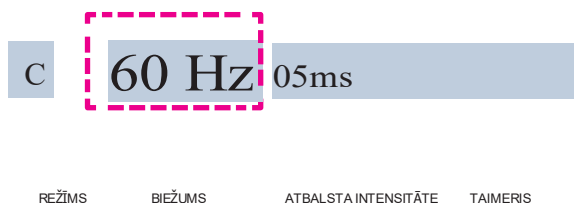


Pagriežiet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/P pogu.

Mirgo pozīcija "ms". Iestatiet impulsa platumu no 5 līdz 100 ms. Apstipriniet ar akceptēšanas pogu. (Jo augstāka frekvences vērtība, jo mazāks impulsa platumu regulēšanas diapazons). piem.:

2Hz mums ir maksimāli 100 ms, pie 20 Hz mums ir ne vairāk kā 40 ms utt.

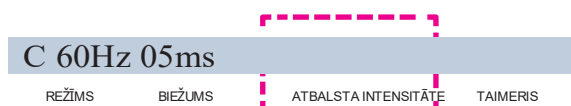

Pagriežiet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Tad mēs izvēlamies ārstēšanas ilgumu no 1 minūtes. līdz 30 min.




Pagrieziet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Pēc pieņemšanas mēs sākam ārstēšanu.

Paņemiet galvu rokā un viegli pieskarieties ķermenim, lai sāktu strādāt.

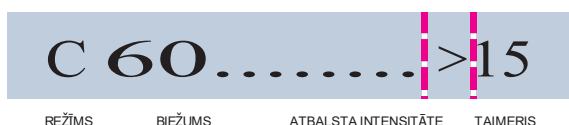

Mirgojošā trīsstūra zīmogs norāda sāktu procedūru un pagājušo laiku. Programmu var apturēt, nospiežot O/P pogu.

Darba laikā mēs regulējam mikrostrāvu jaudu.



mazs Jauda
Vidējais Jauda
liela jauda



Procedūras beigas signalizē ar skaņas signālu (ar nosacījumu, ka skaņas signāls ir ieslēgts).

Mēs varam atteikties no ārstēšanas pēc ilgas O/P pogas nospiešanas.



Sagatavošanās procedūrai

Notīriet un tonizējiet ādu (Aloe Vera Tonic no Biomak Professional līnijas). Noņemiet rotaslietas. Uz attīrītas ādas uzklājiet piemērotu preparātu no Biomak Professional Line sērijas vai piemērotu serumu no Bio Directe sērijas.

Ieteicamās ārstēšanas metodes:

ZMARSZCZKI - Preparāts Nr. 17 - Botox efekts

DARBĪBA:

Pateicoties aktīvo sastāvdaļu daudzveidībai, preparātam ir ādu savelkošs efekts ar pretnovecošanās efektu. Tas intensīvi cīnās ar novecošanās pazīmēm, samazina dziļās grumbas uz sejas un novērš jaunu veidošanos. Tas palielina kolagēna sintēzi ādas šūnās un uzlabo sensorās īpašības, radot komforta, gluduma un maiguma sajūtu.

REZULTĀTS:

Āda atgūst veselīgu izskatu, ir tvirtāka un elastīgāka, grumbas tiek izlīdzinātas.

Ārstēšanas laiks: 20-30 minūtes,
ārstēšana ik pēc 7-10 dienām
3 – 15 procedūras sērijā

TONIZOWANIE SKÓRY - Preparāts Nr. 4.1 - alveja ar vitamīniem

DARBĪBA:

Alveja ir ārkārtīgi bagāts daudzu barības vielu avots. Tas satur lielu daudzumu polisaharīdu, t.i., garo ķēžu cukuru, kas ir mūsu ķermeņa celtniecības un rezerves materiāls. Tas satur vitamīnus (A, C, E, folijskābi, B vitamīnus) un mikroelementus (kalciju, magniju, cinku, selēnu, hromu), kā arī antioksidantus. Tas dziedina un pagarina jaunību.

REZULTĀTS:

Āda tiek intensīvi mitrināta, barota, nomierināta, un epiderma tiek atjaunota. Sejas krāsa atgūst mirdzumu, tvirtumu un elastību. Visiem ādas tipiem, visos vecumos, īpaši jutīgai un kairinātai ādai.

Procedūras ilgums: 15 minūtes,
ārstēšana ik pēc 10 - 28 dienām
1 - 2 procedūras sērijā

BLIZNY - Preparāts Nr. 1 - kolagēns un aļģes

DARBĪBA:

Samazina nokarenu ādu. Tas palielina ādas elastību, piešķirot tai gludu, zīdainu izskatu. Tas izraisa ūdens aizturi, palielinot mitrināšanu pēc virsmas.

REZULTĀTS:

Lietošanas efekts ir izlīdzināt rētas, mitrināt un padarīt ādu elastīgāku.

Procedūras ilgums: 15 - 30 minūtes
Ārstēšana ik pēc 7 – 10 dienām
5 – 15 procedūras sērijā

PRZEBARWIENIA - Sagatavošana Nr. 13 - Punarnava

DARBĪBA:

Bagātīgs pretnovecošanās preparāts. Tās unikālais sastāvs padara ādu elastīgāku un novērš novecošanās pazīmju parādīšanos. Turklāt tas ir bagātināts ar vielu, kas novērš krāsas veidošanos, padara sejas krāsu gaišāku un apvieno tās krāsu.

REZULTĀTS:

Āda atgūst tvirtumu un elastību, tā kļūst redzami gludāka. Tas nodrošina vienmērīgu ādas toni.

Procedūras ilgums: 15 - 30 minūtes
Ārstēšana ik pēc 7 – 10 dienām
3 - 15 procedūras sērijā

TRADZIK ZASKÓRNIKOWY - Preparāts Nr. 8 - Salicilskābe, ekstrakts no
vītols un gurķis

DARBĪBA:

Specializēts preparāts pret pinnēm ar normalizējošu, pārošanās un keratolītisku iedarbību. Pateicoties augstas aktīvās vielas koncentrācijas saturam, tas novērš pūtīšu bojājumu veidošanos, efektīvi normalizē tauku dziedzeru darbu un matē sejas ādu. Tas maigi pīlingo epidermu, paātrina reģenerācijas procesu un atjauno mikrofloras dabisko līdzsvaru. Bagātināts ar augu ekstraktiem, tas samazina ādas apsārtumu un kairinājumu.

REZULTĀTS:

Tas atstāj ādu mitrinātu un izlīdzinātu. Tas nodrošina tūlītēju un ilgstošu epidermas spīduma samazināšanos. Tas atjauno tā elastību un maigumu.

Procedūras ilgums: 15 - 20 minūtes

Ārstēšana ik pēc 14 – 28 dienām

4 – 15 procedūras sērijā

POD OCZY - Preparāts Nr. 6 - punarnava, zirgkastaņa, piena dadzis

DARBĪBA:

Preparātam, kas bagāts ar aktīvo augu sastāvdaļu sastāvu, ir trīsvirzienu efekts:

1. pretgrumbu - samazina esošās grumbas, novērš to atkārtotu erekciju, stiprina, padara ādu ap acīm elastīgāku un savēl,
2. Izgaismošana - stiprina asinsvadu sienas, kuru trauslums ir viens no svarīgākajiem tumšo loku cēloņiem zem acīm. Tam piemīt balinošas un balinošas īpašības.
3. mitrinošs - lieliski mitrina ādu ap acīm, kas faktiski nodrošina tūlītēju un ilgstošu mitrināšanu.

REZULTĀTS:

Āda ap acīm ir gluda un intensīvi mitrināta, tai ir vienmērīga krāsa, un samazinās pietūkums ap acīm.

Procedūras ilgums: 10-15 minūtes,

ārstēšana ik pēc 10-15 dienām

3 – 10 procedūras sērijā

TRAUCĒJUMU STIMULATORI

Interferences stimulācijas terapija

Tas sastāv no divu vidējas frekvences sinusoidālu elektrisko signālu interferences (montāžas) elektrisko impulsu radīšanas, kas nedaudz atšķiras pēc vibrācijas frekvences un tiek uzklāti uz korpusa virsmas krusta formā, izmantojot divus elektrodu pārus. Abi signāli sajaucas noteiktā punktā, un to traucējumu rezultātā tiek radīts jauns elektriskais signāls ar zemu frekvenci, kas vienāda ar komponentu signālu frekvenču starpību.

Kosmētikā traucējumu strāvas tiek izmantotas:

- sejas liftings,
- celulīta noņemšana,
- ādas slāņu un sejas muskuļu tonizēšana,
- sejas muskuļu stimulēšana,
- lokāla tauku noņemšana (piemēram, uz kakla vai augšstilbiem),
- stiprinot taisnās zarnas vēdera muskuļus,
- pēdu muskuļu stiprināšana (plakanu pēdu profilakse),
- samazinot periartikulāro tūsku,
- perifērās asinsrites uzlabošana,
- muskuļu reģenerācija (atkritumu, piemēram, pienskābes, noņemšana).

Kontrindikācijas :

Nelietojiet kameru, ja:

- grūtniecība
- vēzis,
- sirds slimības,
- varikozas vēnas,
- alerģijas,
- ādas slimības,
- recekļi vai tendence uz recekļiem,
- infekcijas,
- cilvēki ar implantētiem elektrokardiostimulatoriem.

Šādos gadījumos skaistumkopšanas un kosmētiskās procedūras drīkst veikt tikai tad, ja tiek uzrādīta skaidra medicīniskā izziņa,

norādot, ka procedūra nerada nekādus iebildumus.

Bikšturi nedrīkst lietot uz jaunas ādas, bez grumbām, kā arī "kaulainās" ķermeņa vietās, ap kakla skriemeļiem un locītavu zonā.

TRAUCĒJUMU STRĀVAS

Traucējumu strāvas impulsi iedarbojas:

- muskuļu sistēma,
- nervu sistēma,
- asins un limfas cirkulācija,
- vielmaiņa.

Traucējumu strāvām ir šādas sekas:

- pretsāpju līdzekļi,
- stimulējošs un tonizējošs,
- nervu sistēmas traucējumu regulēšana.

- * Pretsāpju efekts – palielinot sāpju sliekšni. 90-99Hz
- * Skeleta muskuļu kontrakcijas stimulēšana. 1-10Hz
- * Asinsvadu paplašināšanās
– perifērās asinsrites uzlabošana..... 25-50Hz
- * Uztura procesu un audu vielmaiņas uzlabošana. .. 50-99Hz
- * Autonomās nervu sistēmas tonizēšana..... 80 - 90 Hz

SEJAS UN KAKLA MUSKUĻU STIMULĀCIJAS PROCEDŪRAS

Sejas muskuļu (mīmikas muskuļu) procedūras nedrīkst pārsniegt 5 minūtes vienlaikus. Stimulējot kakla muskuļus, ir jāstrādā tikai ar vienu elektrodu, pielietojot to vienu reizi vienā kakla pusē un vienu reizi otrā.

Procedūras jāveic uz attīrītas, sasildītas ādas. Nelietojiet taukainus preparātus, jo tie veido izolācijas slāni.

ĀRSTĒŠANAS FĀZES

I. Iesildīšanās

Seja: 20 sekundes uz atsevišķām muskuļu daļām ar frekvenci 80-99 Hz (šajā frekvenču diapazonā tiek ietekmēti visi audi: asinsvadi un limfvadi un nervi).

Korpuss: 50-80Hz.

II. Pareiza apmācība

Seja: 80 Hz. Uzmanību! Sejas procedūru laikā nelietojiet frekvences, kas zemākas par 80 Hz.

Korpuss: 10-50Hz

III. 99 Hz apmierinātība

Darbības režīms	Programmas simbols.	Programmas apraksts	Biežums [Hz]	Platums impulss	Ārstēšanas laiks [min]
Traucējumu stimulators	VĪRIETIS	Rokasgrāmata	2600(1-99)	192ASV	1 - 30
	PBL	Pretsāpju līdzeklis	2600(1-110)	192ASV	1 – 30
	TONIS	Tonizēšana	2600(1-88)	192ASV	1 – 30
	KRA	Asinsrites	2600(1-33)	192ASV	1 – 30
	PRZ	Transformācija	2600(1-64)	192ASV	1 – 30
	Produkta kods	Spazmolītiski	2600(1-10)	192ASV	1 – 30

ĀRSTĒŠANAS IETEIKUMI

Ārstēšanas skaits jāizvēlas katram pacientam individuāli (atkarībā no muskuļu stāvokļa un vecuma). Vislabākie rezultāti tiek sasniegti, ja procedūras tiek veiktas ar 2-3 dienu intervālu. Pārtraukumi starp procedūrām nedrīkst pārsniegt 3 dienas.

Ieteicams, lai procedūru sērija nepārsniegtu 12 - 15 stimulācijas. To ilgums vienmērīgi jāsadala no 3 līdz 15 minūtēm.

Lai saglabātu labāku muskuļu stāvokli, ārstēšana jāatkārto pēc apmēram četriem mēnešiem. Regulāra muskuļu vingrošana uzlabo viņu stāvokli, savukārt vienreizēja ad hoc ārstēšana labi ietekmēs asinsriti un sniegs arī relaksācijas sajūtu.

SEJAS UN KAKLA MUSKUĻU STIMULĀCIJAS PROCEDŪRAS

Sejas muskuļu (mīmikas muskuļu) procedūras nedrīkst pārsniegt 5 minūtes vienlaikus. Sejas un kakla procedūrām mēs izmantojam apaļu elektrodu.

Stimulējot kakla muskuļus, strādājiet ar elektrodu, uzklājot to vienu reizi vienā kakla pusē un pēc tam otrā.



Aptiniet apstrādei izvēlēto elektrodu ar marli, kas samitrināta ar ūdeni, kas labi vada elektrību (piemēram, krāna ūdeni). Nelietojiet destilētu ūdeni.


STIMULĀCIJAS PROCEDŪRAS, KO VEIC UZ VĒDERA, SĒŽAMVIETAS, GURNU UN AUGŠSTILBU VIRSMAS

Ieslēdziet kameru, kā aprakstīts.

Pievienojiet elektrodus pagarinātājam un pēc tam PROBE kontaktligzdai.

Atkarībā no apstrādes vietas elektrodi jāmazgā šķērsām šādi:


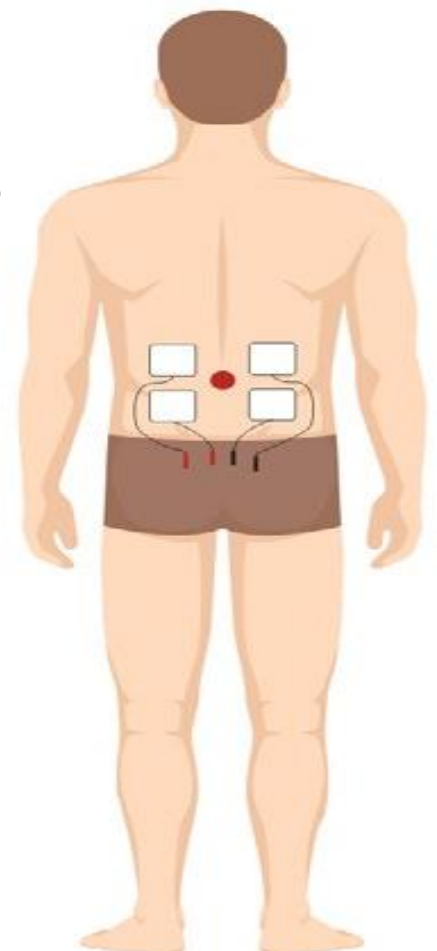
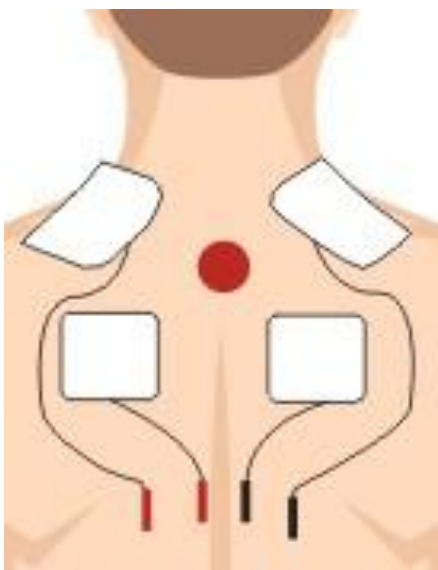


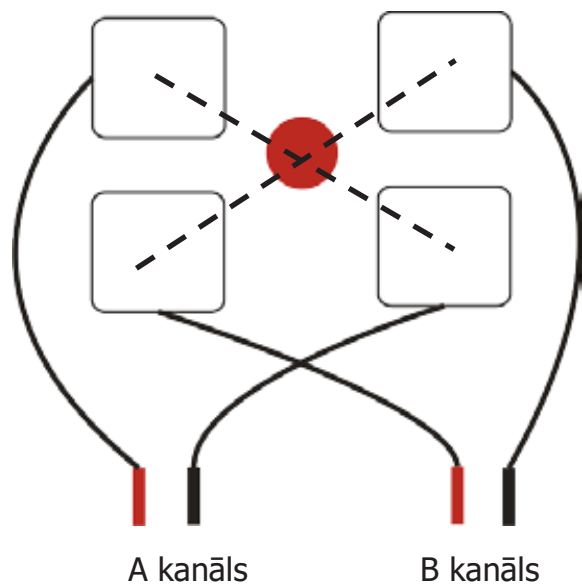

Sakārtojiet elektrodus tā, lai sarkanais vads iet pa diagonāli līdz elektrodam ar melno vadu.

Elektrodu līniju krustošanās punkts nosaka traucējumu strāvu darbības lauku.

Dura-Stick līmes elektrodu izvietošanas piemēri

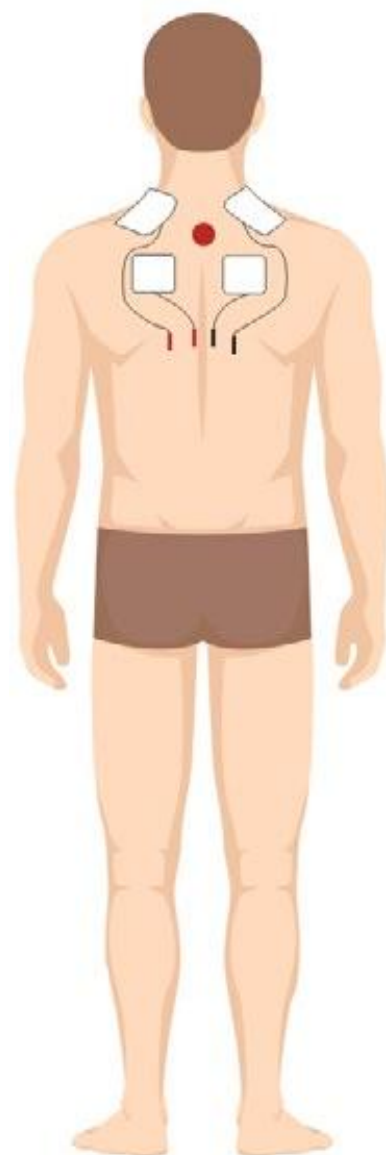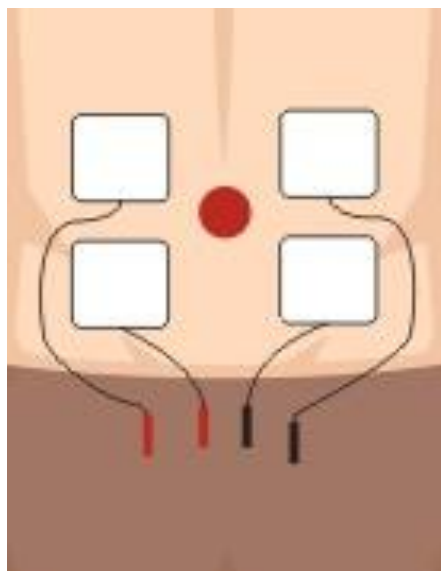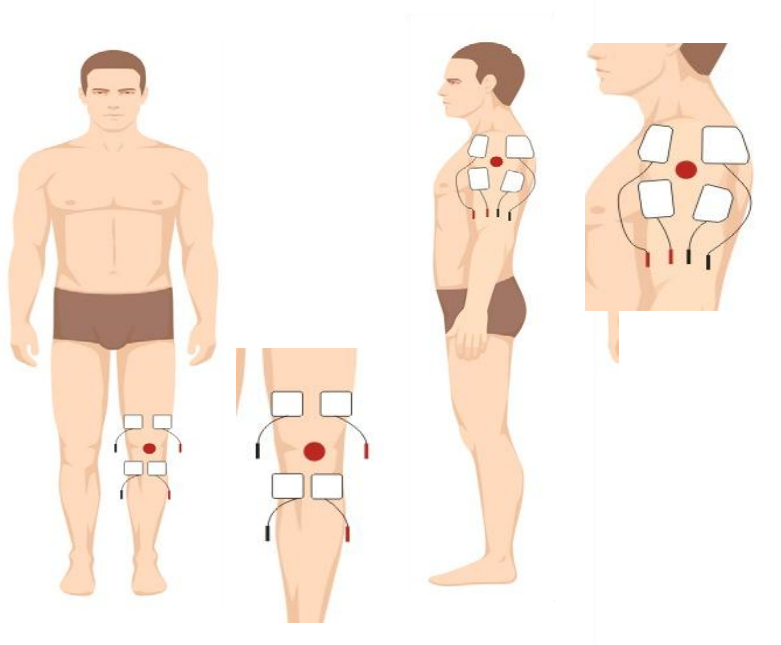

Chattanooga Dura-Stick pašlīmējošie elektrodi ar izmēriem 50x50 mm ar 2 mm ligzdu elektroterapijai un elektrostimulācijai ar BIO-MAK ierīcēm Elektrodi ir elastīgi un viegli piestiprināmi pie jebkuras ķermeņa daļas.


Pārklāts ar īpašu gēlu, kas vada elektromagnētiskos impulsus. Pašlīmējošos elektrodus var izmantot vairākas reizes vienam pacientam, un, pareizi rīkojoties, tie ir pietiekami apmēram 10 lietojumiem. Iepakojumā ir 4 pašlīmējoši 50x50 mm kvadrātveida elektrodi.

Dura-Stick elektrodi ir medicīniska ierīce saskaņā ar prasībām medicīniskajām ierīcēm un Medicīnisko ierīču likuma izpratnē, par kuru ziņots Zāļu, medicīnisko ierīču un biocīdu reģistrācijas biroja uzturētajam Medicīnisko ierīču reģistram, kas aprīkots ar ražotāja atbilstības deklarāciju un uz kura ir CE markējums.

PIEZĪME

Higiēnas un epidemioloģisku iemeslu dēļ, kā arī sakarā ar elektrodu inficēšanos ar mikroorganismiem, kas dzīvo uz ādas, adhezīvie elektrodi ir paredzēti atkārtotai lietošanai tikai vienai personai. Pēc lietošanas vienmēr uzglabājiēt elektrodus cieši noslēgtā iepakojumā, kas piestiprināts pie elektrodiem, tumšā, vēsā un sausā vietā.

skats uz elektrodu no sāniem,
kas vada impulsus

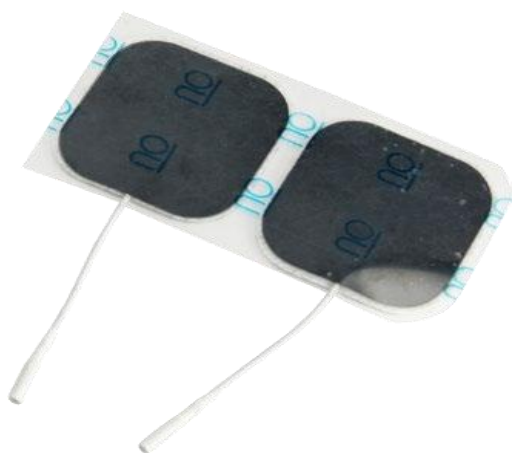

Uzlīmējiēt elektrodus uz attīrītas ādas, pēc tam turpiniet uzstādīt bikšturi.

Pielāgojiēt strāvu tā, lai tā izraisītu skaidru muskuļu reakciju. Jūs varat sākt procedūras 1. fāzi, t.i. lipolīzi. Procedūras ilgums: 30 minūtes. Jārēķinās, ka pašreizējās plūsmas iespaids pēc dažām minūtēm vājināsies, tad, konsultējiēties ar pacientu, intensitāti var nedaudz palielināt.

Pēc procedūras 1. fāzes pabeigšanas jūs varat pāriet uz 2. fāzi, t.i., asins un limfvadu tonizēšanu. Lai to izdarītu, iestatīet strāvu uz vērtību, kas ir zemāka par muskuļu reakcijas sliekšni. Šīs procedūras ilgums: 15 minūtes.

Iestatīet strāvu uz vērtību virs muskuļu reakcijas sliekšņa. Procedūras ilgums: 25 minūtes.

Ierīces sagatavošana procedūrai:

1. Pirms procedūras notīriet un dezinficējiet ādu.
2. Ievietojiet galvas kontaktdakšu PROBE kontaktligzdā.



Elektrokardiostimulatora galvas pievienošana




vai
kabelis un elektrodi ķermeņa stimulatoram
(pēc izvēles nav iekļauts pamatkomplektā)



3. Pārslēdziet ierīci pozīcijā ON ar pogu POWER.



4. Kad kamera ir ieslēgta, atlasiet programmu INT STIMULATOR

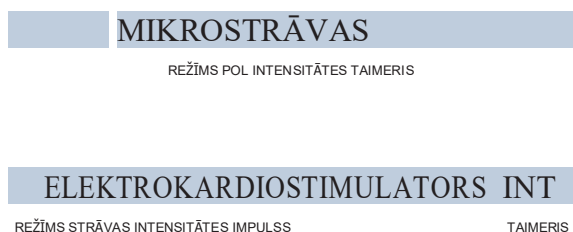

Pagriežot O/R pogu, atlasiet pozīciju.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.



Atpakaļ uz programmas izvēli. Ilgi nospiediet O/R pogu.

Tad būs iespēja izvēlēties ārstēšanas veidus. Jums jāizvēlas pareizā programma – ārstēšana:

KRA - apļveida			
REŽĪMS	BIEŽUMS	ATBALSTA INTENSITĀTE	TIMERIS
TON - toniks			
REŽĪMS	BIEŽUMS	ATBALSTA INTENSITĀTE	TIMERIS
Produkta kods - sistoliskais			
REŽĪMS	BIEŽUMS	ATBALSTA INTENSITĀTE	TIMERIS
HLL - pretsāpju līdzeklis			
REŽĪMS	BIEŽUMS	ATBALSTA INTENSITĀTE	TIMERIS
PRZ - transformācija			
REŽĪMS	BIEŽUMS	ATBALSTA INTENSITĀTE	TIMERIS
VĪRIETIS - rokasgrāmata			
REŽĪMS	BIEŽUMS	ATBALSTA INTENSITĀTE	TIMERIS



Pagriežot O/R pogu, atlasiet pozīciju.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

PROGRAMMAS IESTATĪJUMI: KRA, TON, SKU, PBL, PRZ
ir parādīts PBL programmas piemērā.

HLL - pretsāpju līdzeklis			
REŽĪMS	BIEŽUMS	ATBALSTA INTENSITĀTE	TIMERIS



Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Parādīsies darba laiks. Laika diapazons no 1 min. līdz 30 min.


DARBĪBAS LAIKS 10			
REŽĪMS	BIEŽUMS	ATBALSTA INTENSITĀTE	TIMERIS



Pagriežiet O/R pogu, lai iestatītu laiku.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Pēc pieņemšanas mēs sākam ārstēšanu.

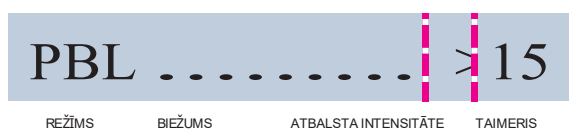

Mirgojošā trīsstūra zīmogs norāda sāktu procedūru un pagājušo laiku.


Programmu var apturēt, nospiežot O/P pogu.



Novietojiet elektrodus vēlamajā vietā un lēnām palieliniet strāvas intensitāti, pagriežot O/P pogu.



mazs Jauda
Vidējais Jauda
liela jauda

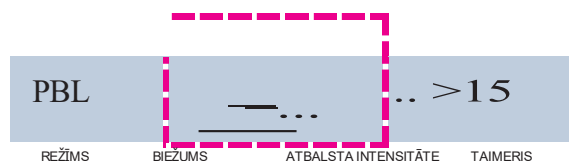

Procedūras beigas signalizē ar skaņas signālu (ar nosacījumu, ka skaņas signāls ir ieslēgts).

Mēs varam atteikties no ārstēšanas pēc ilgas O/P pogas nospiešanas.



MANUĀLIE PROGRAMMAS IESTATĪJUMI

VĪRIETIS - rokasgrāmata

REŽĪMS BIEŽUMS ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS



Pagriežot O/R pogu, atlasiet pozīciju.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Mēs izvēlamies ārstēšanu ar modulāciju vai nē.

MODULĀCIJA JĀ

REŽĪMS BIEŽUMS ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS

MODULĀCIJA NĒ

REŽĪMS BIEŽUMS ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS

Pēc modulācijas izvēles apstiprināšanas, nospiežot pogu O/P, iestatiet darba frekvenci (traucējumus) no 10 līdz 100 Hz



BIEŽUMS

REŽĪMS BIEŽUMS ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS

40



Pagriežiet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Tad mēs iestatījām modulācijas cikla laiku no 5 sekundēm līdz 30 sekundēm.

CIKLA LAIKS

REŽĪMS BIEŽUMS ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS

15



Pagriežiet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Iestatiet ārstēšanas laiku diapazonā no 1 min līdz 30 minūtēm.




Pagrieziet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Pēc pieņemšanas mēs sākam ārstēšanu.

Uzklājiet marli, kas samitrināta (parastā krāna ūdenī) uz elektrodiem, Novietojiet elektrodus uz ķermeņa.

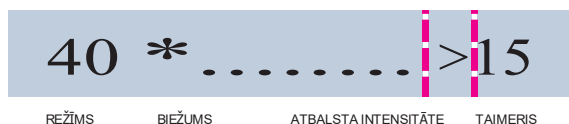


Mirgojošā trīsstūra zīmogs norāda sāktu procedūru un pagājušo laiku. Programmu var apturēt, nospiežot pogu O/P.



Novietojiet elektrodus vēlamajā vietā un lēnām palieliniet strāvas intensitāti, nospiežot pogas Parādīsies citas joslas.



mazs Jauda
Vidējais Jauda
liela jauda

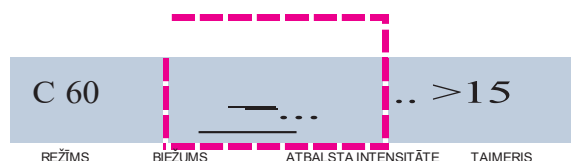

Procedūras beigas signalizē ar skaņas signālu (ar nosacījumu, ka skaņas signāls ir ieslēgts).

Jūs varat atteikties no ārstēšanas, ilgstoši nospiežot O/P pogu.



ELEKTROPORĀCIJA, JONTOFORĒZE, GALVANIZĀCIJA

KABEĻU PIEVIENOŠANA KAMERAĪ

Ievietojiet kontaktdakšu no elektroda roktura (sarkans un melns vads) PROBE kontaktligzdā uz priekšējās plāksnes.



Iemērciet "dzeltenu" joslu sāls šķīdumā vai krāna ūdenī. **Nelietojiet destilētu ūdeni!** Ielieciet elektrodu kabatā un uzlieciet rokassprādzi. Zem joslas ieteicams ievietot samitrinātu pamatu.



Procedūras laikā lietot elektrodus – aktīvs

1. No rezerves elektrodu komplekta izvēlieties procedūrai nepieciešamos.



2. Atlaidiet maināmo elektrodu turētāju, atskrūvējot turētāja galu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

3. Ievietojiet elektroda kātu turētāja caurumā.

4. Pievelciet roktura galu roktura norādītajā virzienā.



Aktīvā elektroda montāžas piemērs



5. BioDirecte seruma elektroda ievietošana

a) Atskrūvējiet seruma vāciņu

b) Ielieciet elektrodu uz pudeles



c) Ievietojiet kabeļa galu (banānu) elektrodu kontaktligzdā



6. Rūpīgi samitriniet visu joslu ar ūdeni, kas sajaukts ar sāls šķīdumu. Nelietojiet destilētu ūdeni, jo tas nevada elektrību.

Tehniskās apkopes darbību apraksts

Pēc ierīces ieslēgšanas ar pievienotajiem elektrodiem mums tiks piedāvāta ārstēšanas izvēle.

ELEKTROPORĀCIJA

REŽĪMS POL INTENSITĀTES TAIMERIS

Apraksts 23.
lpp.

JONOFORĒZE

REŽĪMS POL INTENSITĀTES TAIMERIS

Apraksts 30.
lpp.

GALVANIZĀCIJA

REŽĪMS POL INTENSITĀTES TAIMERIS

Apraksts 32.
lpp.



Pagriežot O/R pogu,
atlasiet pozīciju.

Jūs piekrītat, nospiežot
O/R pogu.



Atpakaļ uz programmas
izvēli. Ilgi nospiediet O/R
pogu.

- izvēloties IONTOFORĒZI vai CINKOŠANU, displejā parādīsies elektrodu tipa izvēle: liels; vidējs; mazs. Izmantojiet pogas, lai izvēlētos procedūrā izmantotā elektroda veidu (iepriekš fiksēts elektrodu turētājs)



Elektrods mazs	
REŽĪMS POL INTENSITĀTES TAIMERIS	
Elektrods Trešdiena.	
REŽĪMS POL INTENSITĀTES TAIMERIS	
Elektrods garš	
REŽĪMS POL INTENSITĀTES TAIMERIS	



Pagriežot O/R pogu, atlasiet pozīciju.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

- tad displejā parādīsies ārstēšanas īpašības, piemēram,

elektroporācijas laikā

ELP+		10
REŽĪMS POL	ATBALSTA INTENSITĀTE	TAIMERIS

Jontoforēzes laikā

JON + 0.00mA	10
REŽĪMS POL	ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS

cinkošanas procedūras laikā

GAL +0.00mA	10
REŽĪMS POL	ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS

Kad mirgo pašreizējais polaritātes simbols, mēs varam mainīt +, -, +/- (+/- tikai jontoforēzes režīmā)

GAL	+	0.00mA 10
REŽĪMS POL		ATBALSTA INTENSITĀTE TAIMERIS



Pagriežiet O/P pogu, lai mainītu vērtību.



Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Nākamais punkts INTENSITĀTE.

- strāvas daudzuma iestatīšana (INTENSITY)

liels	no 0 - 6.00mA
vidēji	no 0 - 4.60mA
mazs	no 0 - 3.00mA

Elektroporācijas procedūra:
mēs mainām jaudu kolonnā

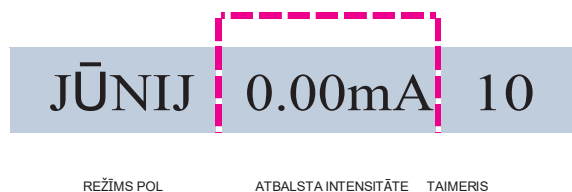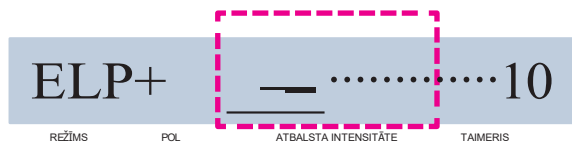

Jontoforēzes ārstēšana
PIEZĪME - šī vērtība tiek iestatīta
procedūras laikā



Galvanizācijas apstrāde
PIEZĪME - šī vērtība tiek iestatīta
procedūras laikā

Taimera pozīcija. Procedūras laika iestatījumi no 1 min līdz 20 min.




Pagrieziet O/P pogu, lai
mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot
O/R pogu.

Pēc laika noteikšanas mēs pieņemam, uzsākot ārstēšanu.

Blakus laika pozīcijai parādīsies ▶ ārstēšanas simbols.

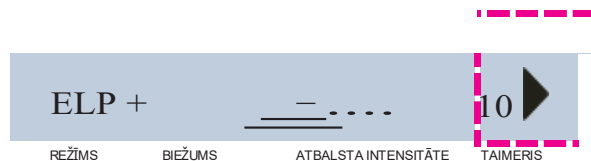

Ārstēšanu var pārtraukt, nospiežot O/P pogu.

Atceliet ārstēšanu, ilgi nospiežot O/P pogu.



ELEKTROPORĀCIJAS APSTRĀDE - metode, kas atbalsta makromolekulu iekļūšanu no starpsūnu telpas uz šūnu iekšpusi. Īsi elektriskie impulsi izraisa nestabilu telpu veidošanos šūnu membrānās.

Starpsūnu telpas polarizācija "-" atvēršana; starpsūnu telpas polarizācija "+" slēgšana. Elektroporāciju var izmantot pirms kosmētikas līdzekļu ievadīšanas manuālās procedūras vai pirms jontoforēzes.

Elektroporācijas procedūrai vajadzētu ilgt no 1-5 minūtēm.


Ārstēšanas metodika

Izpildiet 1.–6. darbību (skatīt 24. lpp.) un pēc tam:

- iestatiet pozitīvo "+" vai negatīvo "-" polaritāti POL pozīcijā.

- izvēlieties atbilstošo strāvas polaritāti: POL +, ievadot pozitīvus jonus

POL - ieviešot negatīvus jonus

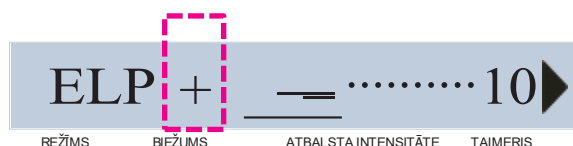

Pagrieziet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekīrat, nospiežot O/R pogu.


Nākamais punkts INTENSITĀTE.

- liela strāvas daudzuma (INTENSITY) iestatīšana no

0 – 6.00mA

vidēji no 0 - 4.60mA

mazs no 0 - 3.00mA

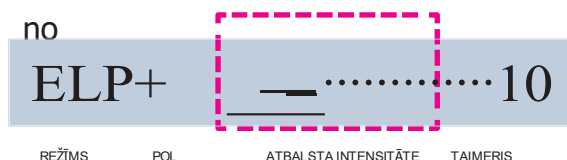


Pagrieziet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekīrat, nospiežot O/R pogu.

Elektroporācijas
procedūra: mēs mainām
jaudu kolonnā

Taimera pozīcija. Procedūras laika iestatījumi no 1 min līdz 20 min.

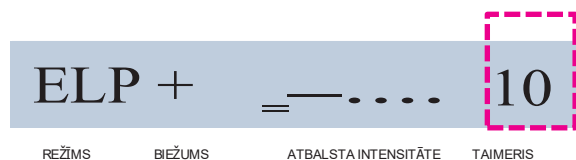

Pagrieziet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Pēc laika iestatīšanas mēs pieņemam, uzsākot ārstēšanu, nospiežot O/P pogu.

Blakus laika pozīcijai parādīsies ▶ ārstēšanas simbols.



- pārvietojiet aktīvo elektrodu ar aplveida kustībām procedūras vietā.
Neveiciet procedūru bez samitrinātām pasīvā elektroda gāzes joslām.

Ārstēšanu var pārtraukt, nospiežot O/P pogu.

Atceliet ārstēšanu, ilgi nospiežot O/P pogu.




JONTOFORĒZES ĀRSTĒŠANA - kosmētikas sastāvā esošo jonu ievadīšana. Polaritātes izvēle ir atkarīga no izmantotās kosmētikas (Piezīme - ieteicams lietot profesionālu Biomak kosmētiku ar noteiktu polaritāti - informācija uz iepakojuma). Pirms katras jonoforēzes procedūras ieteicams nelietot elektroporāciju, lai nodrošinātu labāku preparāta uzsūkšanos.

Ārstēšanas metodika :

Izpildiet 1.–6. darbību (skatīt 24. lpp.) un pēc tam:

- iestatiet pozitīvo polaritāti "+"; negatīvs "-" ; "+,-" POL pozīcijā.

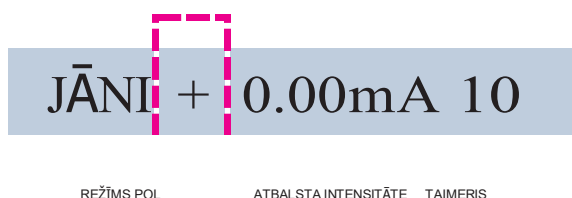

Pagrieziet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

- Izvēlieties atbilstošu pašreizējo polaritāti:

POL +, ieviešot pozitīvus jonus POL - ieviešot negatīvus jonus

POL +/-, ievadot pozitīvus un negatīvus jonus. Polaritātes izmaiņas notiks automātiski ik pēc 30 sekundēm.

Pēc polaritātes iestatīšanas mēs pārejam uz ārstēšanas laika iestatīšanu. Strāvas daudzums tiks pielāgots procedūras laikā.

Procedūras laika iestatījumi no 1 min līdz 20 min.




Pagrieziet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Pēc laika noteikšanas mēs pieņemam, uzsākot ārstēšanu.

Blakus laika pozīcijai parādīsies ▶ ārstēšanas simbols.

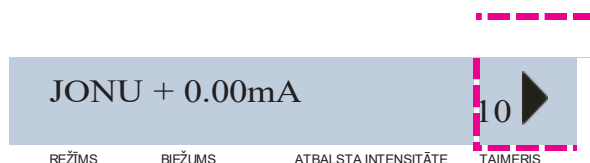

Uzklājiet izvēlēto produktu uz attīrītas ādas. Ja pašreizējā polaritāte ir iestatīta uz preparāta joniem, ieslēdziet strāvu, nospiežot pogu O/P.



Novietojiet aktīvo elektrodu pret ādu un pakāpeniski palieliniet strāvas intensitāti. Intensitātes vērtība tiek parādīta displejā sadaļā INTENSITĀTE. Regulējams no 0 līdz 6 mA, atkarībā no elektroda izmēra.



Pagriežiet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekřitat, nospiežot O/R pogu.

Intensitātes vērtība jāizvēlas atbilstoši ārstēšanai un klienta individuālajai sajūtai. Katrs cilvēks pašreizējās intensitātes vērtības izjūt atšķirīgi ("tirpšanas" sajūta ir intensitātes robeža).

Veiciet apļveida kustības ar aktīvo elektrodu, pakāpeniski novedot pie preparāta uzsūkšanās caur ādu. Pēc jontoforēzes procedūras tiek veikta elektroporācija, lai aizvērtu starpsūnu telpu.

Kopējais ārstēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 10-15 minūtes.

Polarizācija, ko var izvēlēties "+" un/vai "-" bīksturi, attiecas tikai uz aktīvo (ārstēšanas) elektrodu.

Ārstēšanu var pārtraukt, nospiežot O/P pogu.

Atceliet ārstēšanu, ilgi nospiežot O/P pogu.



GALVANIZĀCIJAS APSTRĀDE

Anodu cinkošana - iedarbojas uz ādu ar strāvu ar polarizāciju "+" (pretsāpju līdzeklis, efektīvs apsaldējumā)

Katodiskā cinkošana - iedarbojas uz ādu ar polarizācijas strāvu "-" (stimulējoša, posttraumatiska un pēciekaisuma iedarbība)

Ārstēšana jāveic 10-20 procedūru sērijā katru dienu. Ārstēšanas ilgums ir 5-20 minūtes.

Nepārsniedziet devu 0,1 mA/cm² (elektrodu virsmas laukums)

Izmantojiet šādu izmaiņu gadījumā: anoda galvanizācija:

- rozācija
- vazodilatācija
- telangiektāzija
- ādas asinsvadu neuroze
- ar paplašinātām porām
- Pēc tīrīšanas procedūras
- Svaigs apsaldējums un apsaldējums

Katodiskā galvanizācija:

- zemes āda, slikti apgādāta ar asinīm, slikti skābekli
- vecs apsaldējums un apsaldējums
- pārmērīga svīšana

Ārstēšanas metodika :

Izpildiet 1.–6. darbību (skatīt 24. lpp.) un pēc tam:

- iestatiet polaritāti uz pozitīvu "+" vai negatīvu "-"

POL pozīcijā.



Pagriežiet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

- Izvēlieties atbilstošu pašreizējo polaritāti:

Pēc polaritātes iestatīšanas mēs pārejam uz ārstēšanas laika iestatīšanu. Strāvas daudzums tiks pielāgots procedūras laikā.

Procedūras laika iestatījumi no 1 min līdz 20 min.



Pagrieziet O/P pogu, lai mainītu vērtību.


Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Uzklājiet izvēlēto produktu uz attīrītas ādas. Ja pašreizējā polaritāte ir iestatīta uz preparāta joniem, ieslēdziet strāvu, nospiežot pogu O/P.

Blakus laika pozīcijai parādīsies ▶ ārstēšanas simbols.



Novietojiet aktīvo elektrodu pret ādu un pakāpeniski palieliniet strāvas intensitāti. Intensitātes vērtība tiek parādīta displejā sadaļā INTENSITĀTE. Regulējams no 0 līdz 6 mA, atkarībā no elektroda izmēra.

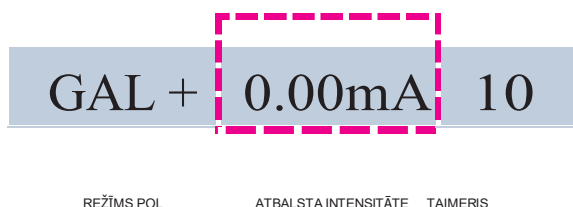

Pagrieziet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Intensitātes vērtība jāizvēlas atbilstoši ārstēšanai un klienta individuālajai sajūtai. Katrs cilvēks pašreizējās intensitātes vērtības izjūt atšķirīgi ("tirpšanas" sajūta ir intensitātes robeža).

Veiciet apļveida kustības ar aktīvo elektrodu, pakāpeniski novedot pie

preparāta uzsūkšanās caur ādu.

Pēc jontoforēzes procedūras tiek veikta elektroporācija, lai aizvērtu starpšūnu telpu.

Kopējais ārstēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 10-15 minūtes.

Polarizācija, ko var izvēlēties "+" un/vai "-" bīksturi, attiecas tikai uz aktīvo (ārstēšanas) elektrodu.

Ārstēšanu var pārtraukt, nospiežot O/P pogu.


Atceliet ārstēšanu, ilgi nospiežot O/P pogu.




IZSLĒGŠANA - SKAŅAS IESLĒGŠANA

Kad esat ārstēšanas pozīcijā:

piemērs izvēlētas sonoforēzes procedūras gadījumā. Katrā citā izvēlētajā programmā mēs rīkojamies tāpat.

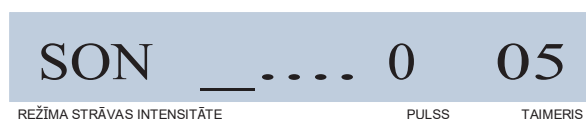

Pēc tam ilgi nospiediet pogu O / P.

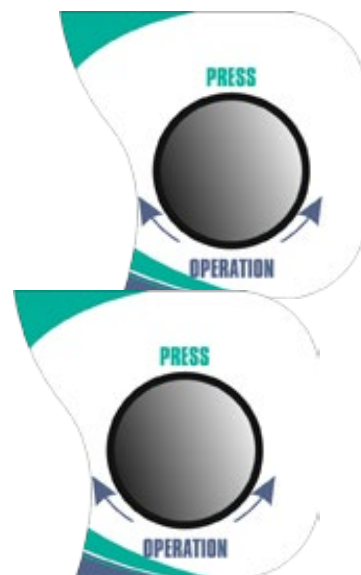

Izejiet no ārstēšanas iestatījumiem, ilgi nospiežot O/R pogu.



VAI



IZVĒLNES VALODAS MAIŅA

Iekļauta skaņa



Pagriežiet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

Izslēgta skaņa

Rīkojieties tāpat kā ieslēdzot un izslēdzot skaņu. Kad jūs esat



VAI



Ekrānā parādīsies pašreiz izvēlētais valoda:



Pagriežiet O/P pogu, lai mainītu vērtību.

Jūs piekrītat, nospiežot O/R pogu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pēc procedūras preparāts jānoņem no galvas. Noslaukiet galvu, elektrodu ar dezinfekcijas līdzekli vai 70% spirtu. Galva jālieto piesardzīgi.

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus.

1. Izmantojiet kameru tikai rokasgrāmatā norādītajiem mērķiem. Nelietojiet piederumus, kuriem nav ražotāja ieteikuma.
2. Nekad nelietojiet kameru, ja tā ir bojāta vai nokritusi, vai ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša. Šādās situācijās nekavējoties informējiet servisa centru par radušajiem defektiem, jo tikai ražotājs var sniegt profesionālu tehnisko apkalpošanu.
3. Mēs iesakām ierīci nelietot mājās, jo to drīkst darbināt tikai apmācīts, pilnvarots personāls.

4. UZMANĪBU!

Elektriskās strāvas trieciena risks.

Pieņemiet apkalpošanu tikai no kvalificēta personāla. Lai nodrošinātu pastāvīgu ierīces darbības drošību, "sadedzinātie" drošinātāji vienmēr jāaizstāj ar tāda veida drošinātājiem, kas tika piegādāti kopā ar ierīci.



B I O M A K

05-820 Piastów Słońskiego 13
tāl./fakss: (0-22) 723-69-54Tāl.(0-22) 723-70-72
e-pasts: biomak@biomak.pl
www.biomak.eu

BEAUTY PRO BP200 v2_4 2018-02-21