

SATURS

I. ROKASGRĀMATA

1. Tehniskā informācija	3
1.1 Aparāta komplektācija	3
1.2 Aparāta tehniskie dati	3
1.3 Aparāta galvenās sastāvdaļas	4
1.4 Uzstādīšana/pieslēgšana un aksesuāri	4
1.5 Eksploatācijas noteikumi un drošības pasākumi	5
1.6 Sterilizācija/dezinfekcijas	6
1.7 Uzturēšana un kopšana	6

II. GARANTIJA

2. Garantijas pienākumi	6
2.1 Vispārīgie noteikumi	6
2.2 Ražotāja garantija	7
2.3 Piegādes nosacījumi	8
2.4 Informācija par iespējamiem utilizācijas veidiem	8
2.5 Pārstāvniecības	8

1. Tehniskā informācija

1.1 Aparāta komplektācija

1.	Aparāt T-12	1 gab.
2.	Akrila handpiece atbalsts	1 gab.
3.	Strāvas vads	1 gab.
4.	Adapters multi-savienojuma aparātu sērijā T	1 gab.
5.	Darba uzgali ar aktīvo elektrodu un kabeli savienojumi	1 gab.
6.	Kontaktinformācija uzgali ar pasīvo elektrodu un kabeli savienojumi	1 gab.
7.	Lietotāja rokasgrāmata	1 gab.
8.	Transportēšanas iepakojums	1 gab.

1.2 Aparāta tehniskie dati

Barošanas spriegums	220-240 V, 100-120 V
Frekvence elektrotīklu	50 Hz; 60 HZ
Jaudas patēriņš	45 W un mazāk, atkarībā no izvēlētās darba intensitāti.
Strāvas spēks	0.2-30 mA
Frekvence strāva darbība	2,5-5 kHz
Gabarīta izmēri aparāta	300*213*60 mm
Gabarītu izmēri pēc iepakojuma (kaste)	410*290*160 mm
Svars (neto)	1.85 kg
Svars (bruto)	3.5 kg


1.3 Aparāta astāvdaļas



Attēlā redzams aparāta galvenās sastāvdaļas:

1. Mezoterapijas Aparāts T-12;
2. Uzgali;
3. Adapters - sērijā T;
4. Strāvas vads, lai savienotu iekārtas pie elektrotīkla;
5. Lietotāja rokasgrāmata;

Attēlā zemāk ir izskats priekšējā paneļa aparāta T-12

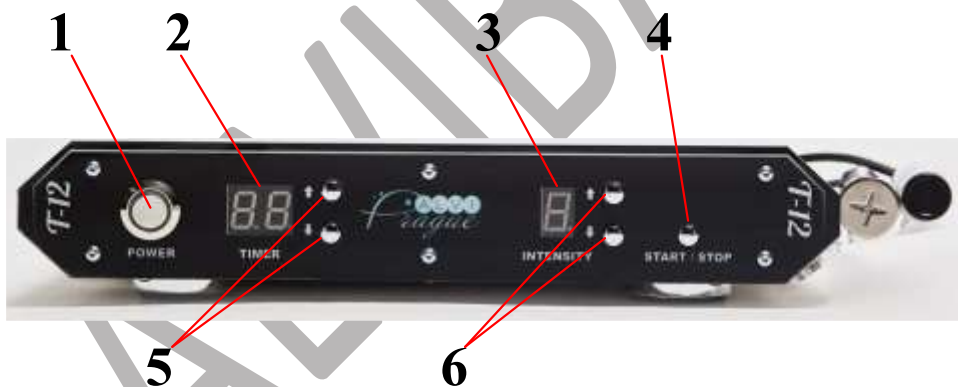

Uz priekšējā paneļa izvietoti šādas kontroles:

1. Poga POWER
2. Indikators laika TIMER
3. intensitātes indikators INTENSITY
4. Poga START/STOP
5. Laiku regulēšanas pogas
6. Intensitātes regulēšanas pogas

1.4 Uztādīšana/pieslēgšana un aksesuāri

Lai uzstādītu aparāta T-12, nepieciešams veikt norādīto darbību secībā:

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
2. Pievienojiet aparātu pie elektrotīkla ar barošanas vadu.
3. Pievienojiet darba piederumi (darba un kontaktu uzgali) tos, kas atrodas iekārtas aizmugurē.
4. Pārliedziniet, ka savienotāji ir pareizi pievienoti un aparāts ir gatavs darbam.
5. Piesakieties padeve uz aparāts nospiežot pogu uz aizmugurējā paneļa aparāta pozīcijā "I".
6. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu "Power", kas atrodas uz priekšējā paneļa.
7. Atzīmējiet nepieciešamo laiku, norises procedūras (no 1 līdz 99 min). Lai iestatītu laiku, izmantojiet pogu, lai uzstādītu laiku (uz vadības paneļa pogu "TIMER").
8. Lai uzstādītu spēku ietekmes, izmantojiet pogu "INTENSITY" uz vadības paneļa;
9. Pēc norādītajiem iestatījumiem aparāts ir gatavs darbam.
10. Noklikšķiniet uz "START", lai sāktu darbu ar aparātu.

1.5 Eksploatācijas noteikumi un drošības pasākumi

1. Pievienojiet uzgali TIKAI izslēgtā stāvoklī aparāta.
- 2. Aizliegts noslaucīt ierīces akrila daļas ar spirtu saturošiem šķidrumiem vai mazgāšanas līdzekļiem.**
3. Nedrīkst pieļaut aparāta krišanas un to piederumus.
4. Nav instalēt ierīci siltuma avotu tuvumā un nepieļaut nokļūšanu tiešiem saules stariem aparātu.
5. Nepieļaujiet šķidrumu, eļļu u.tml savienotāji savienojumu un iekšā aparāta korpusa.
6. Veicot darbu pie klienta, saglabājiet bezmaksas vadu savilkšana uzgaļu. Neļaujiet vadu salikšanu.
7. Daļas aparāta, kas nonāk saskarē ar ķermeni klienta (elektrodi darba instrumentus) ir jādezinficē pirms un pēc procedūras.
8. Veiciet procedūru tikai ar īpašiem kosmetoloģiskām līdzekļiem, kas paredzēti šīs procedūras, kurām ir atbilstoša kvalitāte.
9. Aparāts tiek pielietots apstākļos procedūru telpas kosmētisko salonu apkārtējās vides temperatūrā no +10 līdz +35 °C un relatīvā gaisa mitruma līdz 80%. Aizliegts aparāta izmantošanu hidroterapijas kabinetā;
10. Aizliegts veikt remontu un tehniskās apkopes iekārtas ārpus pilnvaroto servisa centrā.
11. Pēc transportēšana aukstumā pirms lietošanas aparāts ir ne mazāk kā 3 stundas glabājas pie temperatūras no +10 līdz +35 grādiem.

12. Klientam un apkalpojošajam personālam aizliegts, procedūras veikšanas laikā pieskarties metāla daļām cita veida iekārtas uzstādīšana, ar elektroapgādes tīklu pieslēgumu, kā arī metāla daļas, kas ir saņemti, vai ir lielas jaudas attiecībā pret zemi.

13. Jāievēro piesardzība attiecībā uz klientiem ar paaugstinātu termosensitīvītāti un jutīgumu elektro-plūsmai.

14. Nav atļauts veikt procedūras, ķermeņa apvidos, kuros ir metāla implantu un citus metāla priekšmetus.

15. Nav atļauts veikt procedūras ar klientiem elektrokardiostimulatori.

16. Aizliegts ekspluatēt aparāts vienā telpā ar citu aparāturu, piem., MIKROVIĻŅU vai UHF terapiju.

17. Aizliegts izmantot, lai veiktu procedūras, darbarīki, kuras neietilpst piegādes komplektā aparāta.

18. Aizliegts mazgātāja ar bojātu korpusu, barošanas vadu, kabeli, darba rīku, vai pats darba instruments.

19. Pirms procedūru veikšanai klientam un kosmetologam ir jānoņem visas rotaslietas un dārglietas (rokas pulksteņi, auskari, kaklarotas utt).

1.6 Sterilizācija/dezinfekcija

1. Uzgaļi ir apstrādāmi ar līdzekli, kas neizraisa koroziju metālām, optimālais uzgaļu sterilizācijas laiks līdz 5 minūtēm.

2. Nedrīkst lietot dezinfekcijas līdzekļus, kas satur hloru.

1.7 Uzturēšana un kopšana

1. Aparātu virsmastīrīšanai, noslaukiet to ar mīkstu kokvilnas drāniņu, kas samitrināta ar ūdeni vai ziepjūdeni.

2. Pagrieziet regulatorus, ar mērenu intensitāti.

3. Pavadīt regulāru telpās uzkopšanu, lai izvairītos no putekļiem, kas var novest pie izejas no aparāta darba stāvokļa.

4. Pirms darbu uzsākšanas, pārliecinieties, ka tajā nav mehānisku bojājumu, vadi, ultraskaņas manipulas, aparātu korpusa un pareizību savienojumu ultraskaņas manipulas.

Gadījumā, ja radusies jebkuru defektu, ieteicam nekavējoties pārtraukt ierīces lietošanu un sazināties ar ar klientu apkalpošanas centru.

2. Garantijas pienākumi

2.1 Vispārīgie noteikumi

Šī garantija ir derīga tikai tad, ja garantijas talons ir pareizi aizpildīts – pārdēvēja zīmogs un pārdošanas datums. Garantijas laiks izstrādājumi skaitāms no pirkuma datuma. Garantijas nosacījumi ir spēkā saskaņā ar Likumu "Par patērētāju tiesību aizsardzību", reglamentē tās valsts tiesību aktiem, un tie nekādā veidā neietekmē ierobežo patērētāju tiesības. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētajos apstākļos.

Atgādinām, ka likuma «Par patērētāju tiesību aizsardzību» normas neattiecas uz pirkumiem, kurus veikušas juridiskās personas. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta ražotāja noteikta garantija.

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

- ja prece tiek izmantota mērķiem, kuriem ražotājs vai piegādātājs garantiju nav paredzējis;

- ja prece tiek izmantota, neievērojot instrukcijā norādītos brīdinājumus vai mērķiem, kam tā nav paredzēta;

- ja uz preces ir redzamas patstāvīgi veikta remonta pazīmes vai ir veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;

- ja ir mainīts, dzēsts vai nav nosakāms preces sērijas numurs;

- ja precei ir ārējās ietekmes izraisīti bojājumi;

- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, kurus radījis pats klients, stihiska nelaime, ugunsgrēks, sabiedriskie faktori, neparedzēti ārējie apstākļi;

- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, ko izraisījusi nestandarta un sliktas kvalitātes materiālu, rezerves daļu, piederumu un aksesuāru izmantošana.

Garantija neattiecas uz trūkumiem (defektu) izstrādājumi, ko izraisa šādu iemeslu dēļ:

- dabīgo nolietojumu dēļ daļām, kurām ir ierobežots kalpošanas laiks, kā arī palīgmateriālu (baterijas, cimdi mikrostrāvas, aprobe presoterapijas un tā tālāk), bojājumiem, kas ir radušies nepareizi vai pavirši lietošanu, uzglabāšanu, apkopi, iekārtu, darbību un ļaunprātīgi vai nepareizi montāžu, ja prece tika izmantota neparedzētajos apstākļos;

Garantijas apkalpošana neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti;

Ja ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;

2.2 Ražotāja Garantija

Ražotāja garantija attiecas, ja tas atbilst noteikumiem un nosacījumiem, ekspluatācijas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

- 1. Garantija 18 mēnešiem attiecas tikai uz iekšējo komplektācijā aparātu;**
- 2. Garantija 6 mēneši attiecas tikai uz uzgaļa un ārējie piederumi (izņemot atrinolietojamas daļas un palīgmateriālu).**

2.3 Piegādes noteikumi

Piegāde un nosūtīšana no garantijas centra notiek uz pircēja rēķina.

2.4 Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem

Ar kosmetoloģijas aparātiem nav tā sastāvdaļas, kas var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un piesārņo vidi.

Pēc ekspluatācijas termiņa beigām tās var pārstrādāt bez īpašam noteikumiem.

Komplektējošie izstrādājumi (čipsi, rezistori, kondensatori un tā tālāk), kas pēc ekspluatācijas termiņa saglaba darbības speku, var izmantot kā rezerves daļas, rezerves daļas, lai veiktu remontu šādu un līdzīgu aparātu.

2.5 Pārstāvniecības

Valsts:	Adrese:	Telefons:
Čehija	Prague 5, Štefánikova 18/25 15000	+420 (228) 880691
Ukraina	Kijevā, v Jeļenas Телиги, 5-В	+38 (068) 568 83 66 0 (800) 33 98 14
Krievija	Maskavas, Rjazaņas rp t, tālāk 10, lapa 2	+7 (800) 250 5459
Latvija	Rīga, Madonas iela 21-85	+371 (2) 212 1543